

Инструкция

по скачиванию и установке СПО «ФармЦентр»

1. Скачивание дистрибутива программы.

Дистрибутив программы находится на сайте ООО «Медилон-Фармимэкс» в разделе «ФармЦентр» (Рис.1).

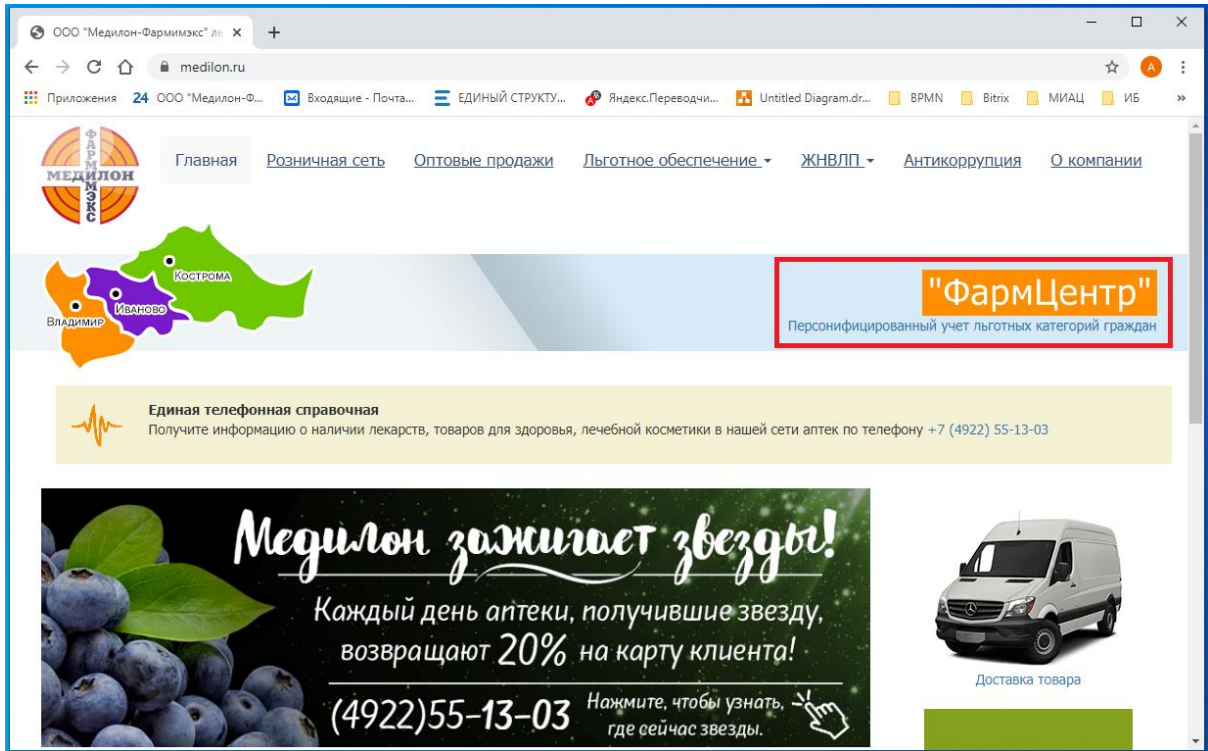


Рис. 1

Далее необходимо выбрать СПО «ФармЦентр» и раздел «Скачать» (Рис. 2).

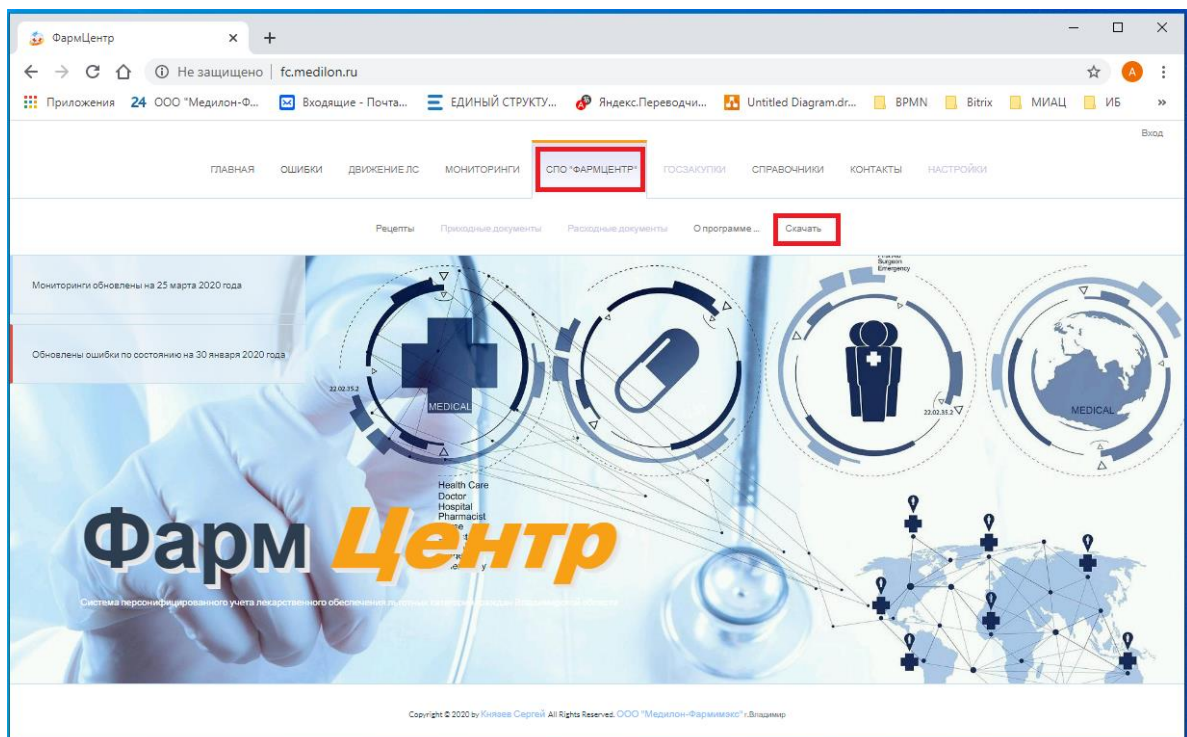


Рис. 2

Прямая ссылка раздела сайта для скачивания:
<http://fc.medilon.ru/index.php?r=site/page&view=downloads>

В этом же разделе доступна документация программы:

- Инструкция по установке и скачиванию (данный документ),
- Описание функциональных характеристик,
- Руководство пользователя,
- Инструкция по устранению неисправностей.

Для скачивания дистрибутива программы нажмите на кнопку с надписью СПО «ФармЦентр» (Рис. 3).

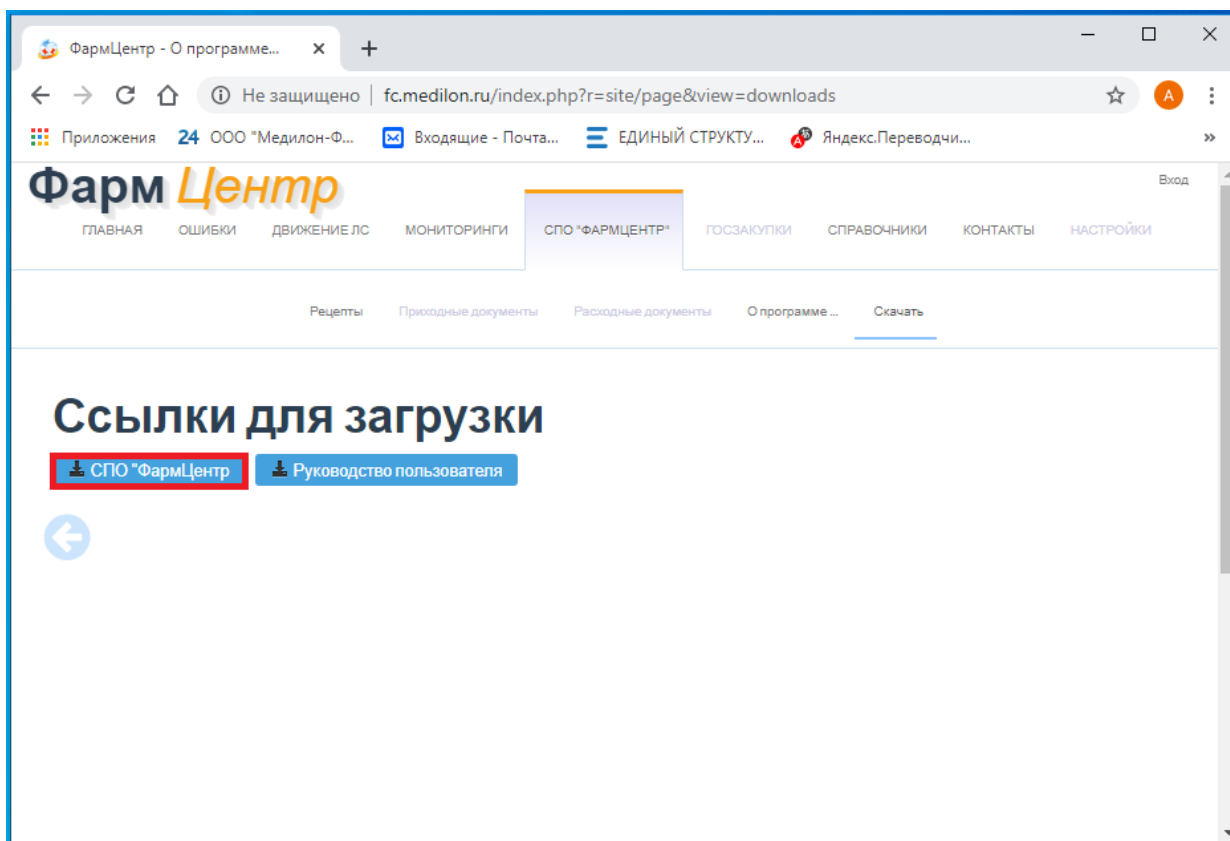


Рис. 3.

2. Установка программы.

После скачивания дистрибутива программы – для установки запустите файл farmcenter_setup.exe.

В открывшемся окне программы инсталляции нажмите «Далее» - Рис. 4.

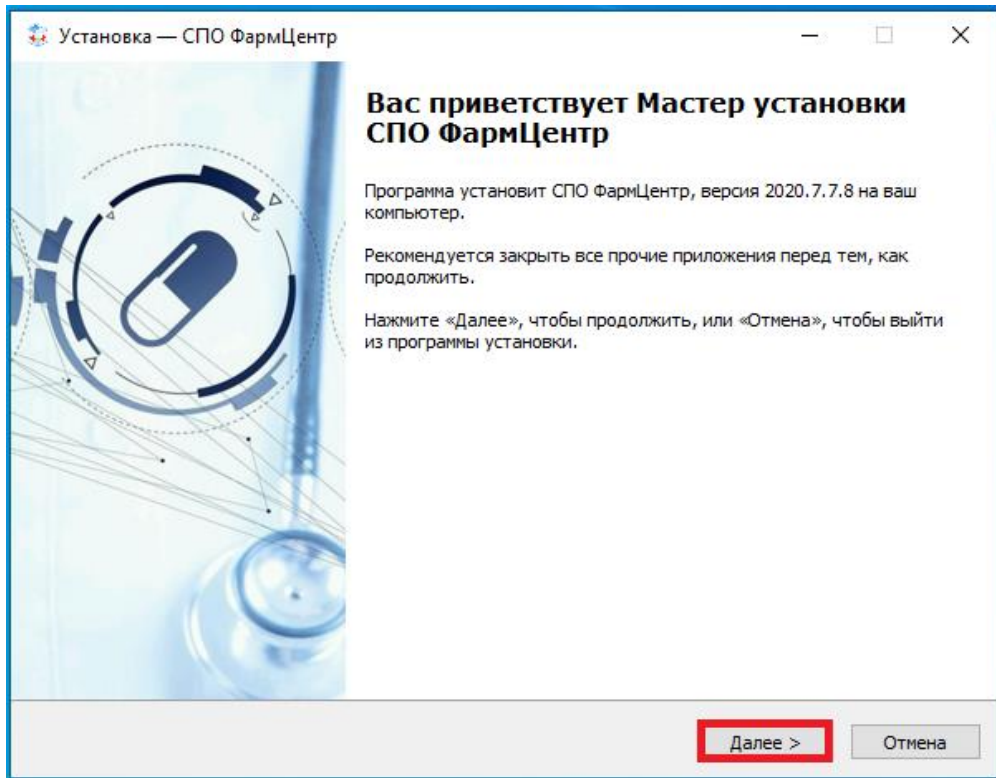


Рис. 4

Примите Лицензионное соглашение и нажмите кнопку «Далее» - Рис. 5.

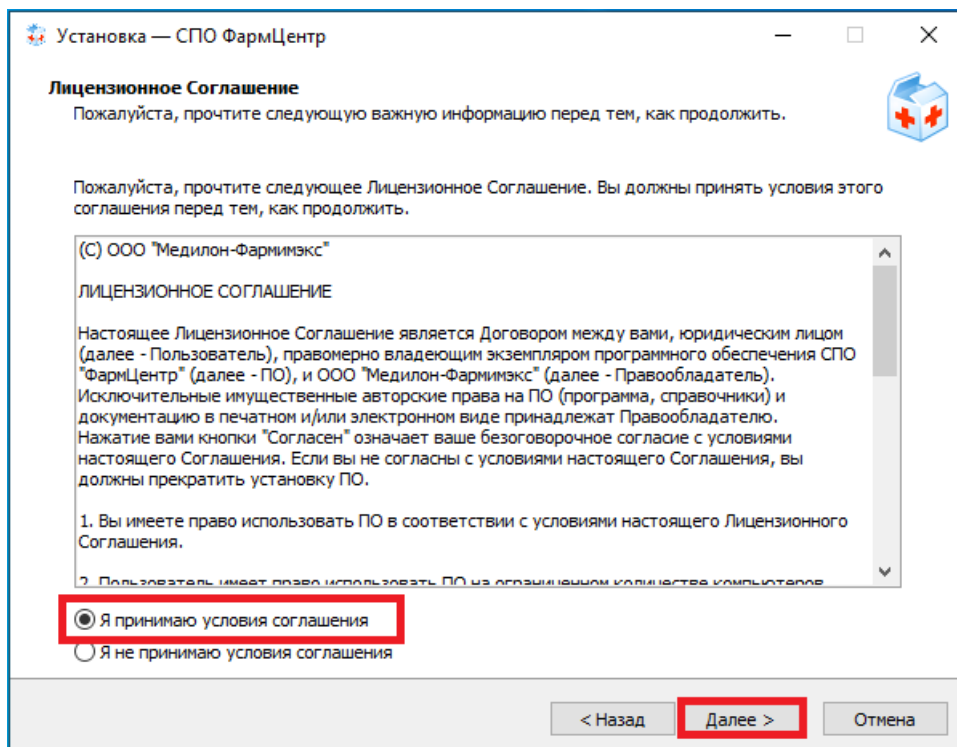


Рис. 5

Ознакомьтесь с информацией перед установкой и нажмите кнопку «Далее» - Рис. 6.

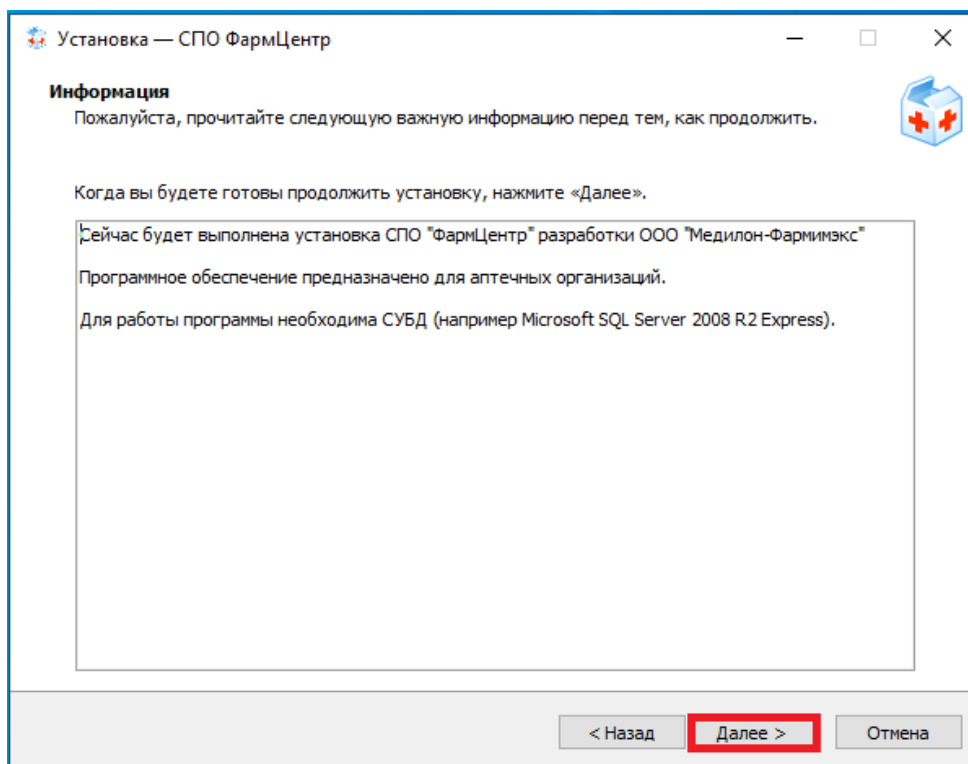


Рис. 6

Для установки программы в папку по умолчанию нажмите «Далее» - Рис. 7.

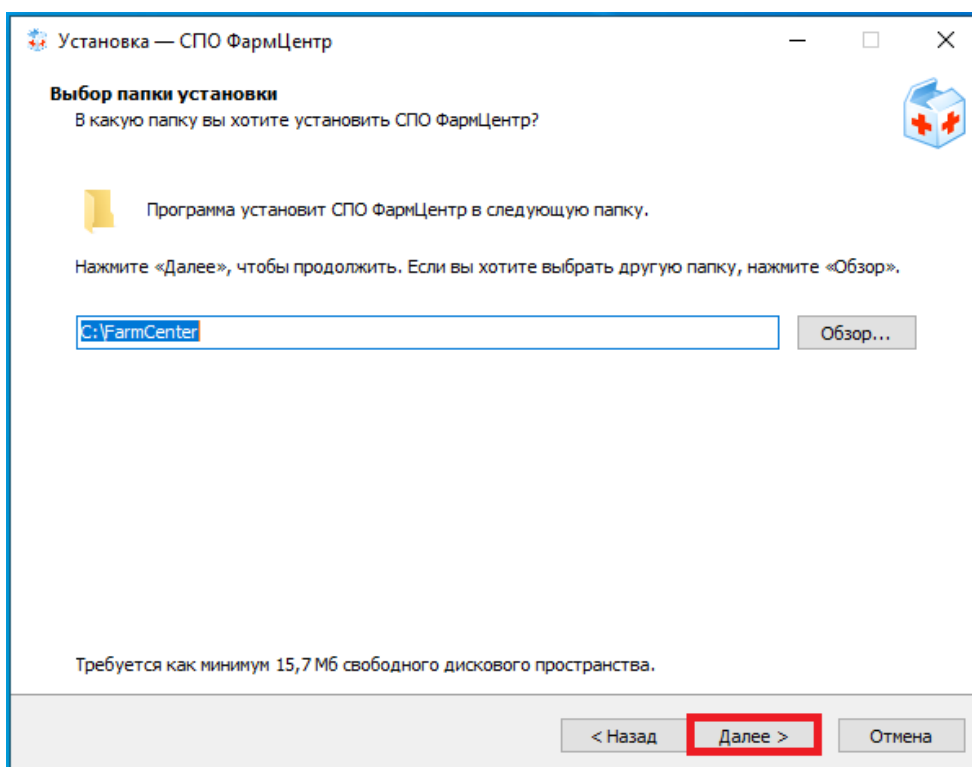


Рис. 7

На этапе выбора компонентов для установки (Рис. 8) можно выбрать либо «Полную установку» (Программа и файлы базы данных), либо «Только клиентская часть» (Только программа).

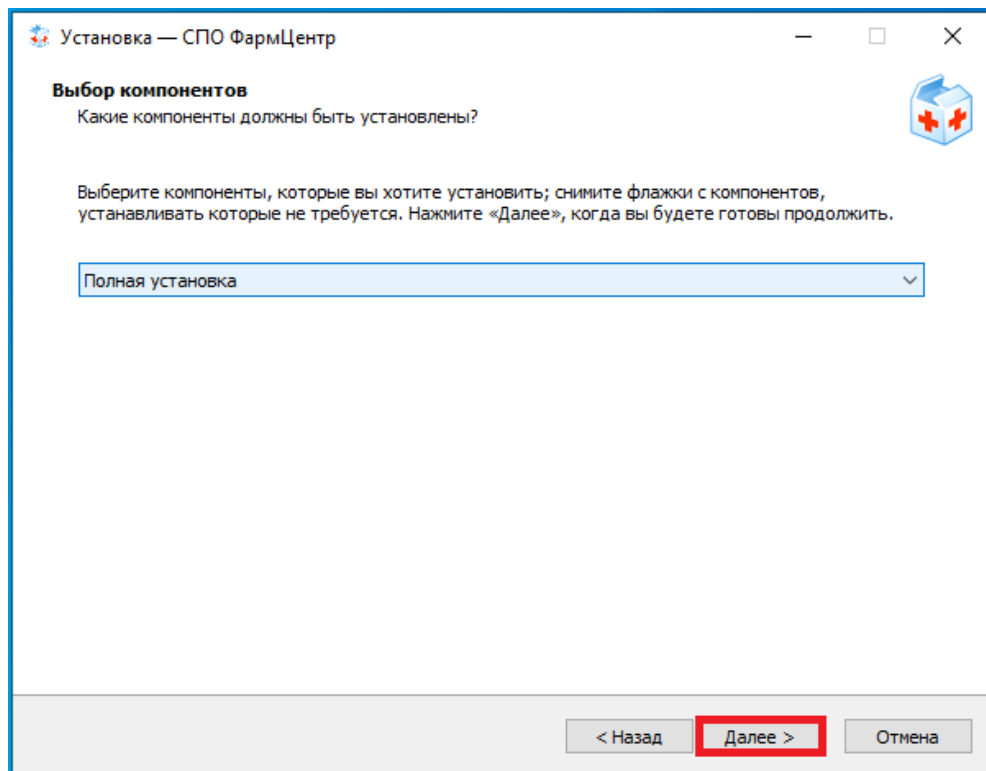


Рис. 8

В окне выбора дополнительных задач можно отказаться от создания ярлыков программы на рабочем столе пользователя (Рис. 9).

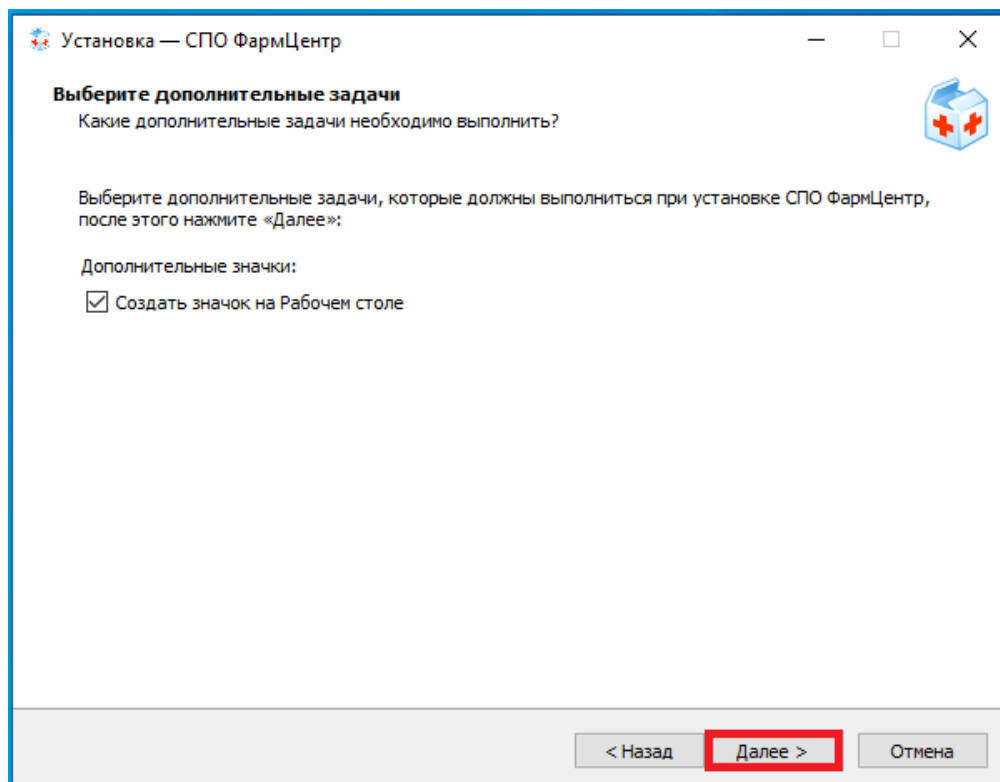


Рис. 9

Далее проверяется корректность параметров установки и нажимается кнопка «Установка» для начала инсталляции программы – Рис. 10.

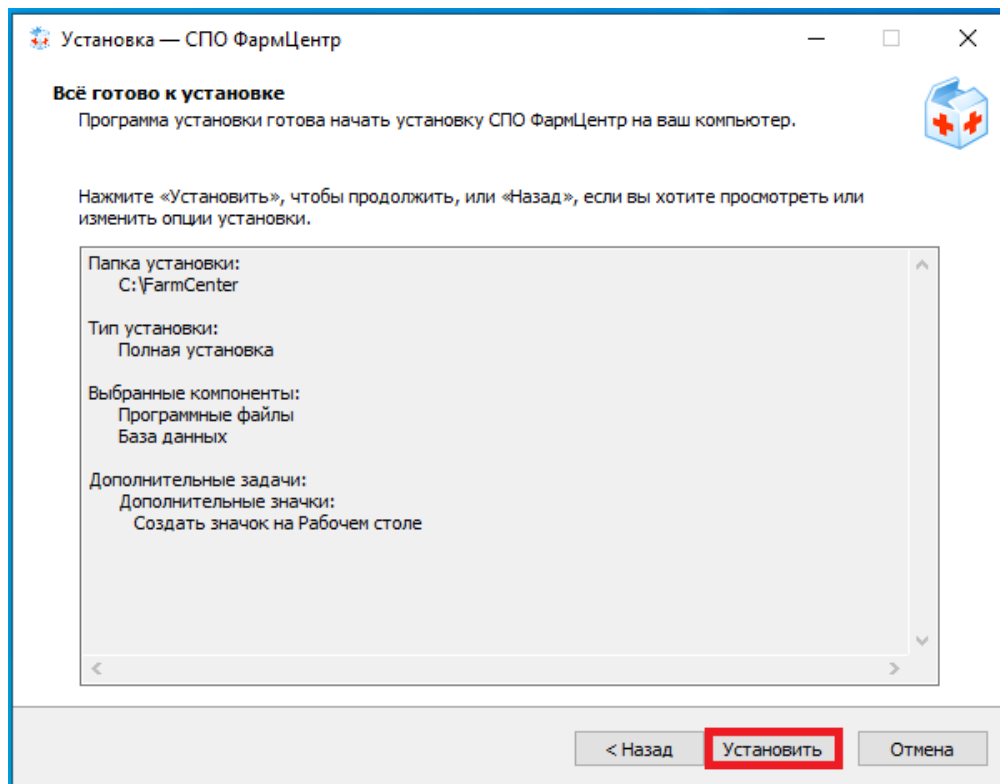


Рис. 10

После окончания инсталляции программы – ознакомьтесь с информацией о технической поддержке и нажмите «Далее» (рис. 11).

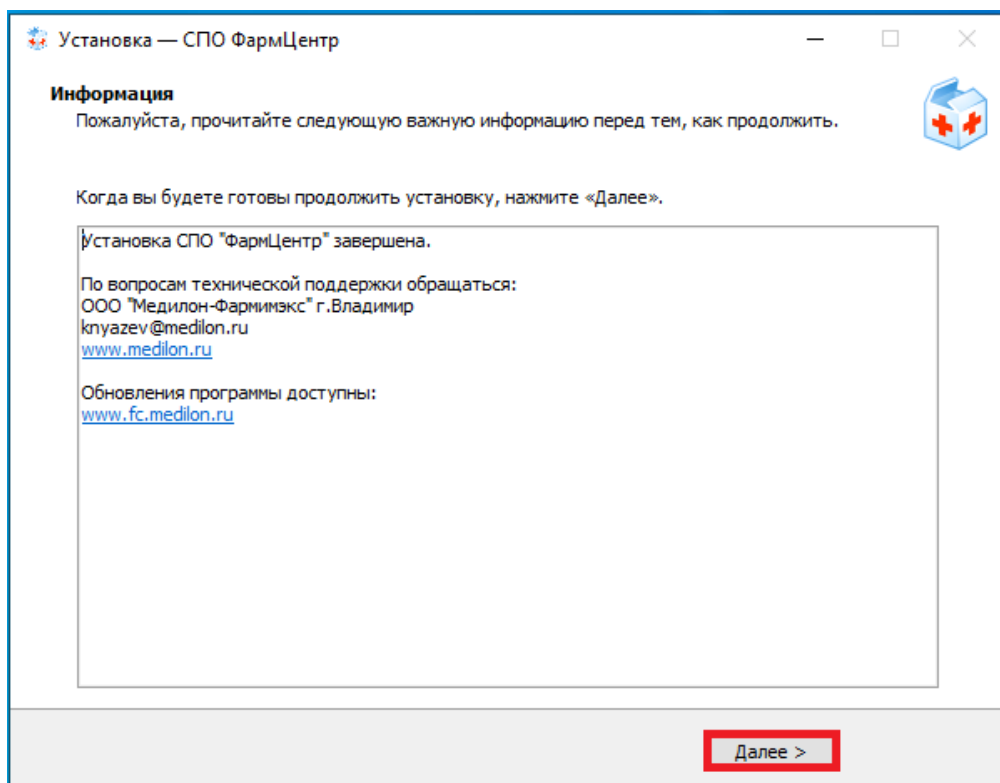


Рис. 11

В окне «Подключение к БД» при необходимости можно выполнить подключение к базе данных (Рис. 12). Если подключение не требуется – сразу нажмите кнопку «Далее» .

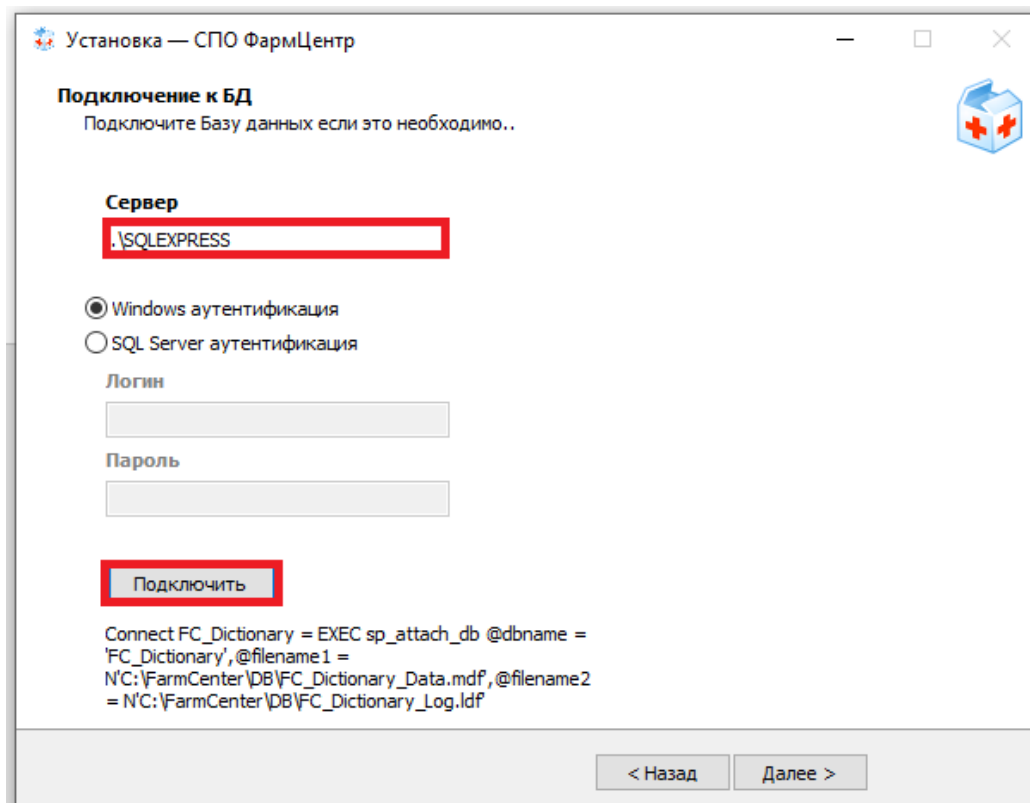


Рис. 12

Для этого укажите:

- Имя сервера (по умолчанию «.\SQLEXPRESS»),
- Тип авторизации (Windows или SQL Server),
- Логин и пароль администратора (для авторизации SQL Server).

И нажмите кнопку «Подключить». В случае успешного подключения будет выдано сообщение об удачном подключении (рис. 13).

В случае появления ошибок обратитесь к разделу «Неисправности при подключении к базе данных» документа «Инструкции по устранению неисправностей СПО ФармЦентр».

После выполнения подключения – нажмите кнопку «Далее».

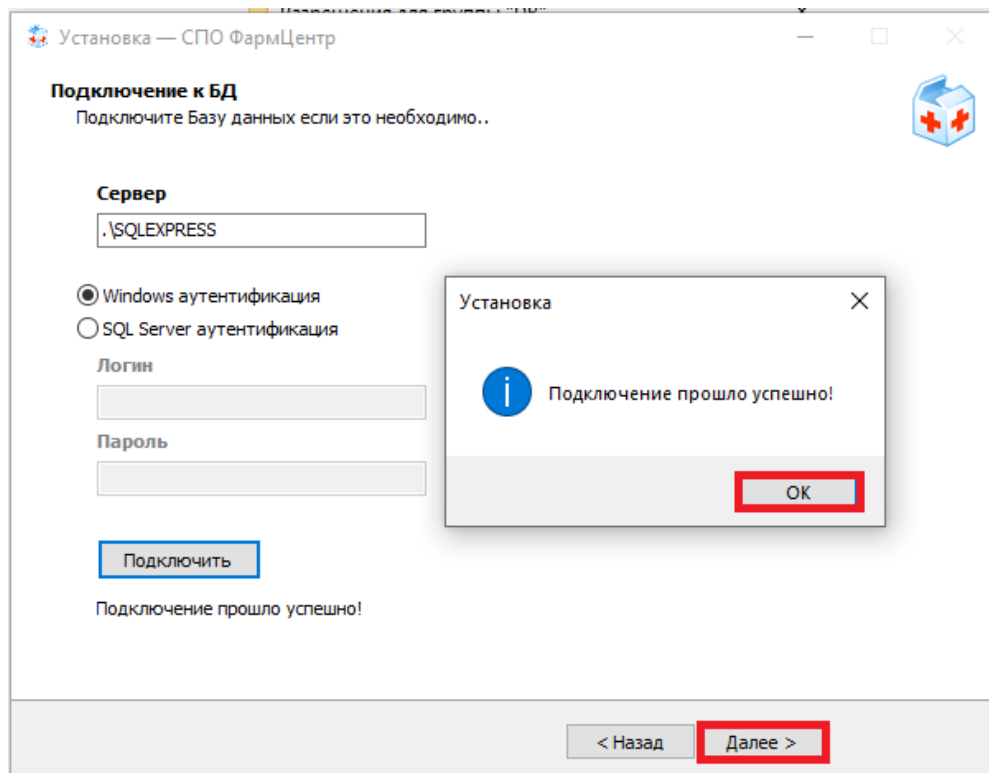


Рис. 13

В заключительном окне можно снять галочку «Запустить СПО ФармЦентр», если немедленный запуск не требуется (Рис. 14).

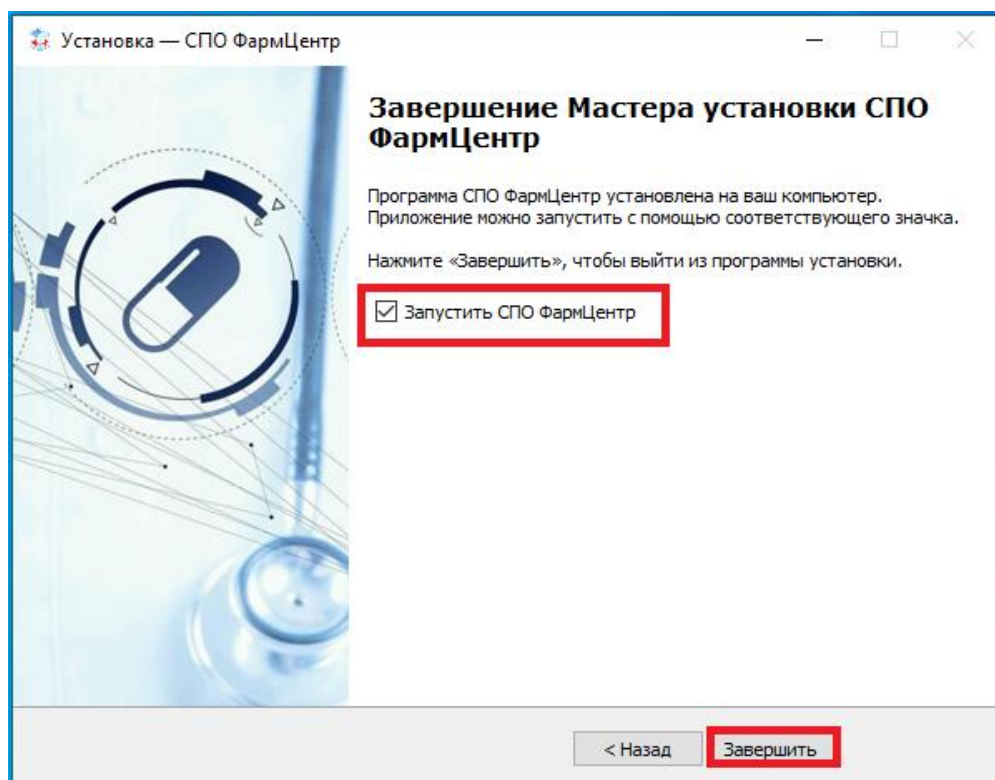


Рис. 14

Для выхода из программы установки – нажмите «Завершить».

3. Запуск программы.

Для запуска программы можно использовать ярлык на рабочем столе – Рис. 15.

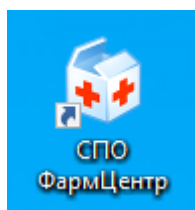


Рис. 15

Либо меню «Пуск» - раздел «Программы» (Рис. 16).

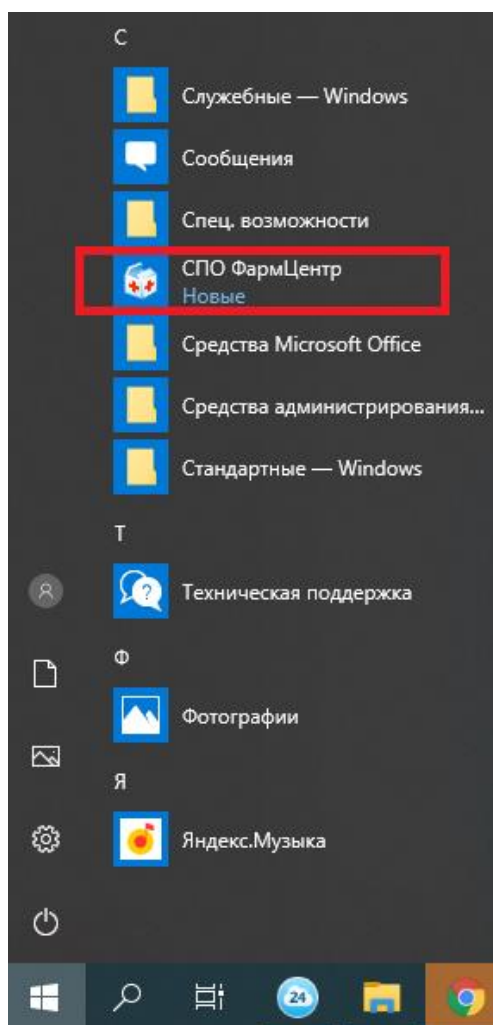


Рис. 16.

После запуска программы введите пароль оператора (Рис. 17). Пароль по умолчанию – 123. Рекомендуется сменить пароль.

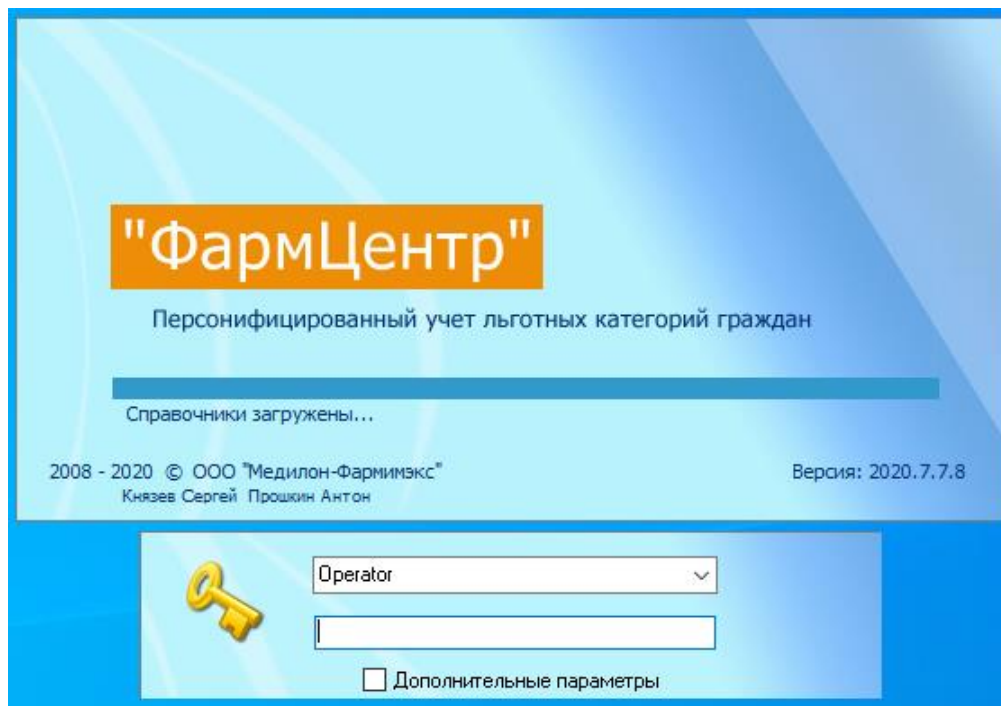


Рис. 17

При возникновении ошибок при запуске и входе в программу обратитесь к разделу «Неисправности при запуске и входе в программу» документа «Инструкции по устранению неисправностей СПО ФармЦентр»

После входа в программу – открывается главное окно (Рис. 18).

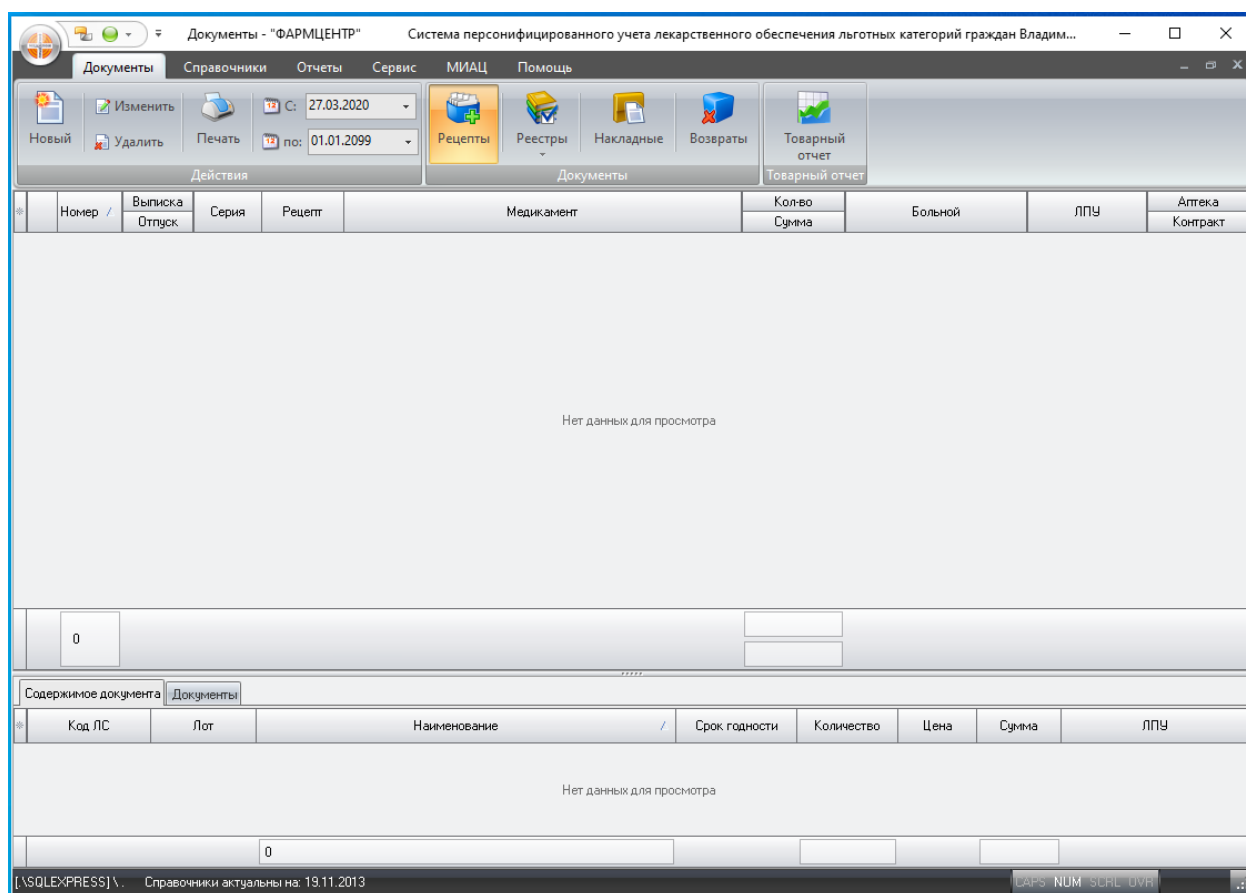


Рис. 18

Для получения справочной информации по работе с программой обратитесь к документу «Руководство пользователя СПО ФармЦентр».

4. Денисталляция программы.

Для удаления программы с компьютера – выберите в меню «Пуск» раздел «Параметры» (Рис. 19).

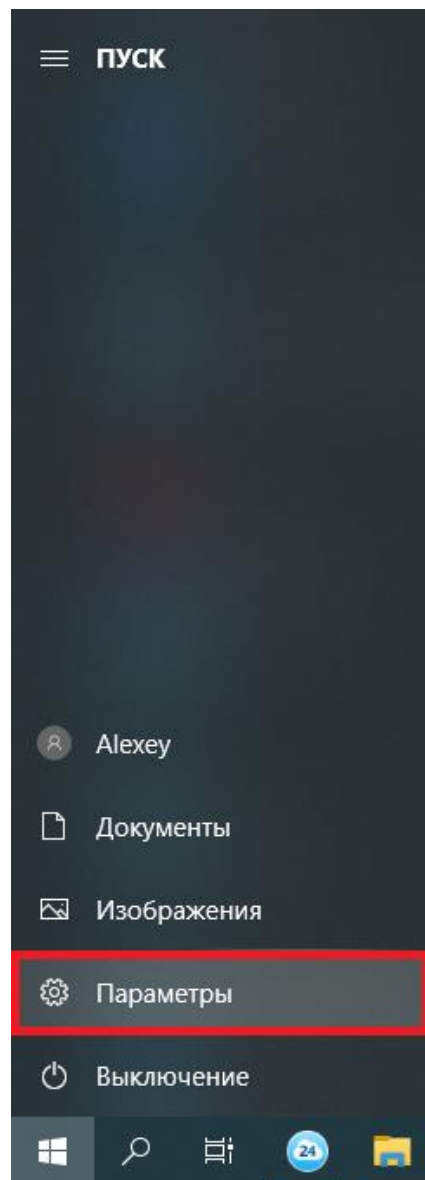


Рис. 19

Далее выберите раздел «Приложения» - Рис. 20.

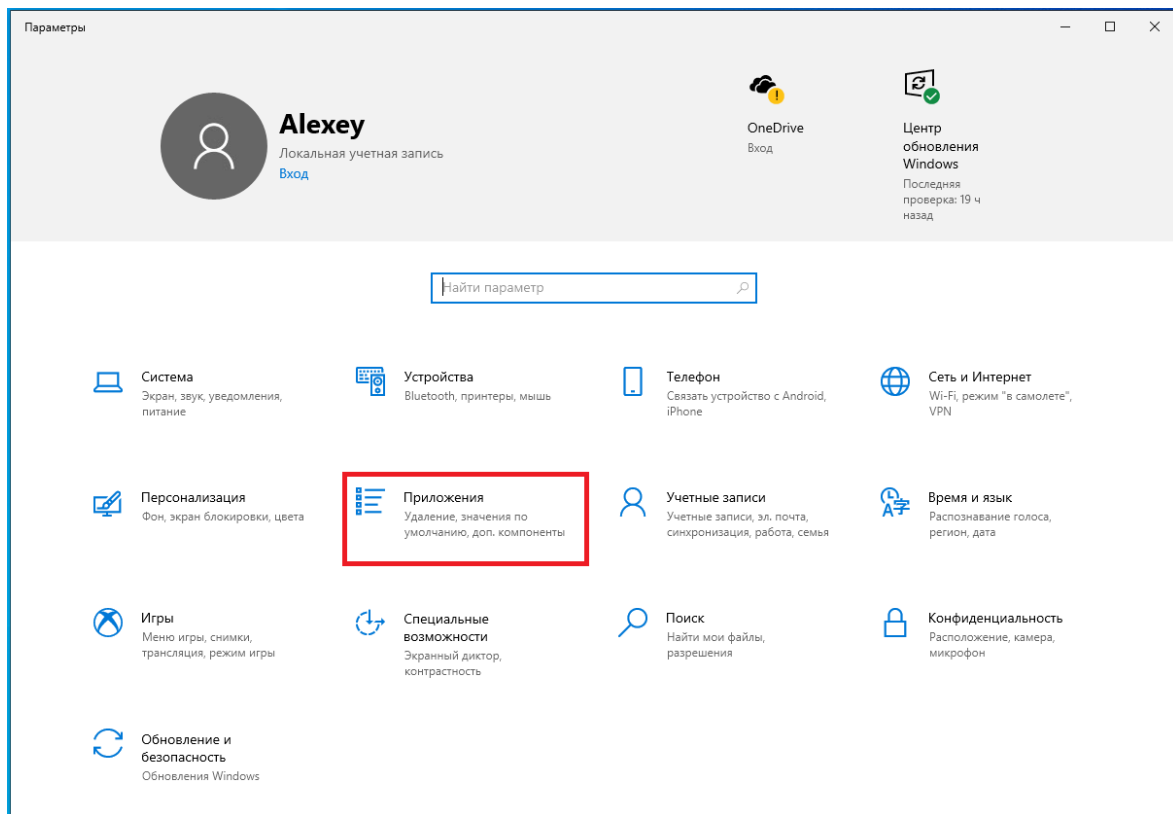


Рис. 20

В Разделе «Приложения и возможности» найдите программу «СПО Фармцентр» и нажмите кнопку «Удалить» - Рис. 21.

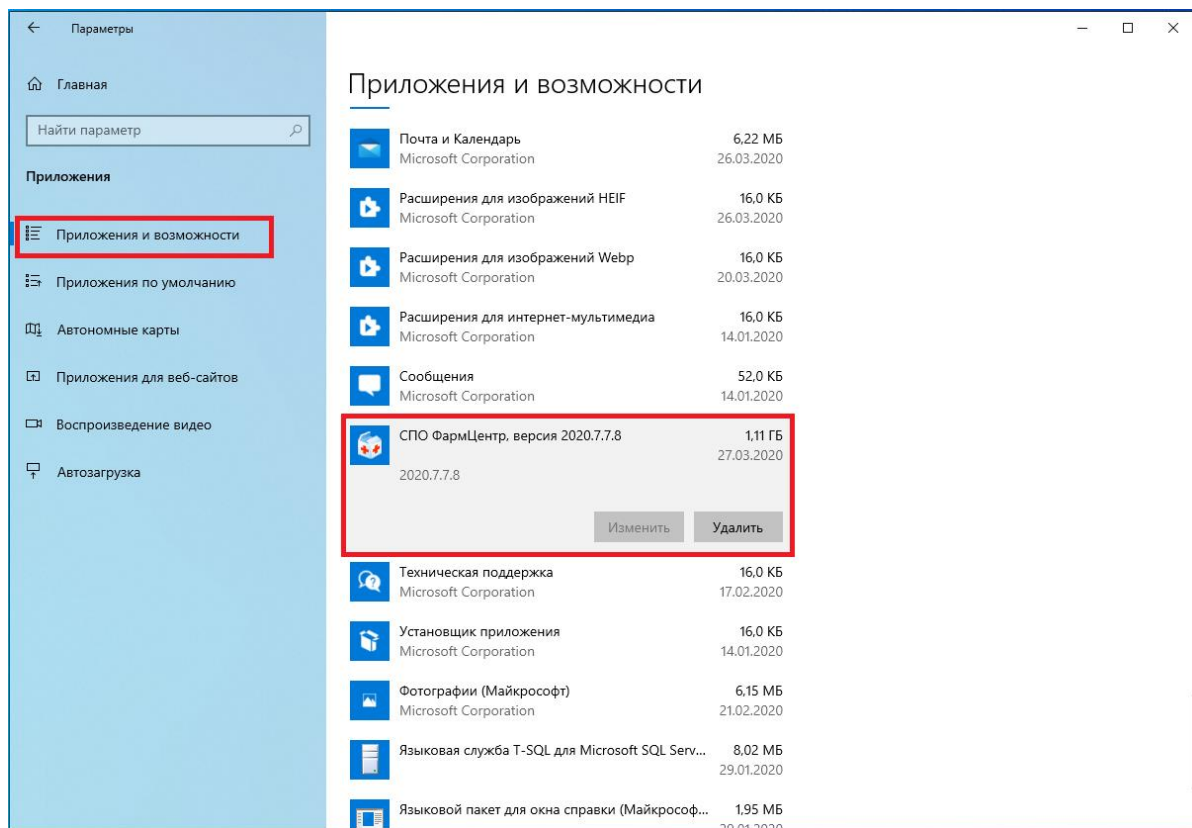


Рис. 21

Подтвердите удаление программы – Рис. 22.

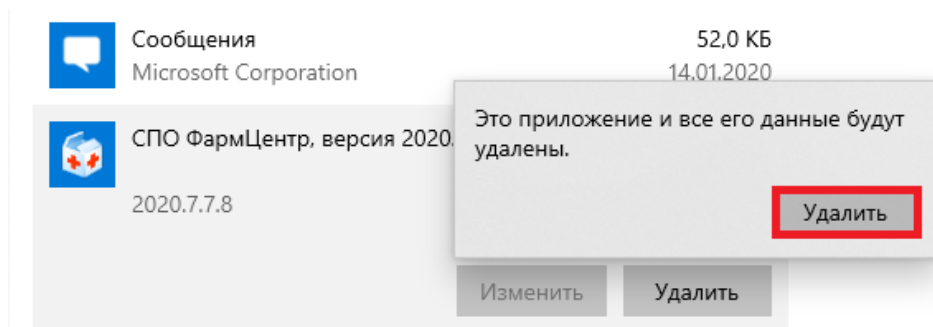


Рис. 22

В запусившемся деинсталляторе программы еще раз подтвердите удаление программы (Рис. 23).

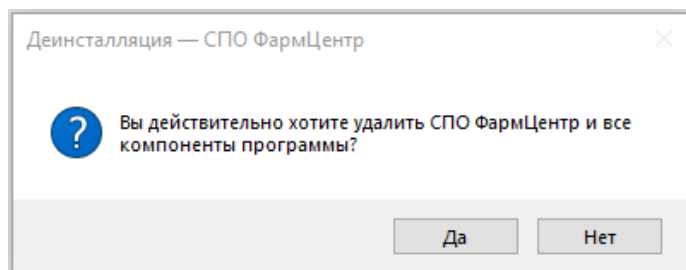


Рис. 23

После завершения удаления программы будет выдано сообщение – Рис. 24.

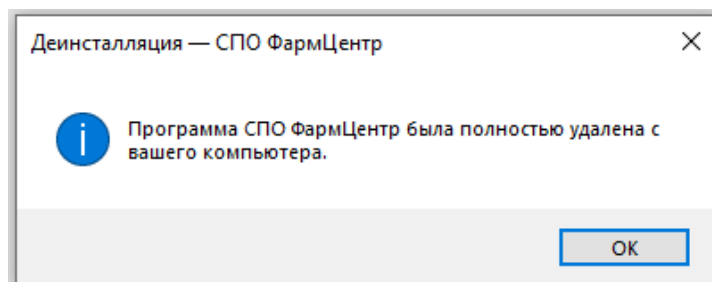


Рис. 24

При деинсталляции программы, во избежание потери данных файлы базы данных не удаляется - C:\FarmCenter\DB\FarmCenter_Data.mdf и C:\FarmCenter\DB\FarmCenter_Log.ldf. Кроме того, остаются созданные во время работы с программой файлы – например файлы настройки. Для полного удаления необходимо вручную удалить папку программы – по умолчанию C:\FarmCenter\.